

# Ortoser för hand & arm



mediroyal 

Living Proof

[mediroyal.se](http://mediroyal.se)



403



403

### Art. 403, Pucci Hand Air Short

Denna behandlingsortos tillåter en fortskridande lätt passiv töjning till en hand med kontrakturer genom den pumpbara luftkudden som ligger volart i handen. Ortosen levereras med överdragsklädsel till luftkudden, en pump som blåsan kan regleras med samt en tvättpåse. Placera alltid luftkudden i patientens handflata före pumpningen. Luftventilen på ortosen skall alltid ligga åt lillfingersidan. Ortosen finns även i barnstorlek. Extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger och vänstermodell. **INDIKATIONER:** Förhindra och töja på kontrakturer.

403	Pucci Hand Air, Short Vä/Hö		
403L-Vuxen	Vänster	Handbredd upp till 120 mm	Universal
403R-Vuxen	Höger	Handbredd upp till 120 mm	Universal
403PL-Barn	Vänster	Handbredd upp till 120 mm	Universal
403PR-Barn	Höger	Handbredd upp till 120 mm	Universal
403PSL-Barn	Vänster	Handbredd upp till 64 mm	Universal
403PSR-Barn	Höger	Handbredd upp till 64 mm	Universal

För beställning av extraklädsel till vuxen uppge 403 CL och/eller 403 CR.



Mättet för handbredden tas i mm. Skenan måste tas ut vid tvätt.



405



405

405

### Art. 405, Pucci Air T

Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled. Denna unika ortos för både handled, hand och fingrar har en dynamiskt pumpbar luftblåsa. Ger en lätt töjning åt hand och fingrar med ökad tonus. Flexorerna påverkas i ortosen och handen kommer upp i ett normal läge. Luftblåsan är utformad så att den också för ut tummen i en lätt volarabduktion till ett öppningsgrepp. Om patienten har en flexionskontraktur i handleden på 5° eller mer, justera ramen på ortosen så den överensstämmer med handledsvinkeln volart i handen. Luftblåsan kan justeras enkelt med hjälp av den medföljande pumpen utan att ortosen behöver avlägsnas från patientens hand. Ortosen finns även i barnstorlek. Finns i höger- och vänstermodell. **INDIKATIONER:** Spasticitet, förhindra kontrakturer vid CVA.

405	Pucci Air T, Vä/Hö		
405L-Vuxen	Vänster	Handbredd upp till 130 mm	Universal
405R-Vuxen	Höger	Handbredd upp till 130 mm	Universal
405PL-Barn	Vänster	Handbredd upp till 130 mm	Universal
405PR-Barn	Höger	Handbredd upp till 130 mm	Universal

VUXEN: Ramställning för underarm (180 mm) med pumpbar anpassad luftblåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av extraklädsel uppge 405-CL och/eller 405-CR.

BARN: Ramställning för underarm (140 mm) med pumpbar anpassad luftblåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av extraklädsel uppge 405P-CL och/eller 405P-CR.



Mättet tas från vola.



Mättet för handbredden tas i mm. Skenan måste tas ut vid tvätt.

## Art. 413, Pucci Air

Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled. Hanledsortos baserad på artikel 405 Pucci Air T. Luftblåsan är en pumpbar hel luftblåsa både för hand och fingrar. Ger en fortskridande lätt påverkan på kontrakturer i handled och fingrar. Vid en neutral position i handleden, från 0° upp till 15° extension, behöver inte ramens vinkel justeras före användning. Ortosen finns även i barnstorlek. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- eller vänstermodell. **INDIKATIONER:** Spasticitet, förhindra kontrakturer vid CVA.

413	Pucci Air, Vå/Hö		
413L-Vuxen	Vänster	Handbredd upp till 130 mm	Universal
413R-Vuxen	Höger	Handbredd upp till 130 mm	Universal
413PL-Barn	Vänster	Handbredd upp till 130 mm	Universal
413PR-Barn	Höger	Handbredd upp till 130 mm	Universal

VUXEN: Ramställning för underarm (180 mm) med pumpbar hel luftblåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av extraklädsel uppge 413-CL och/eller 413-CR.

BARN: Ramställning för underarm (140 mm) med pumpbar anpassad blåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av extraklädsel uppge 413P-CL och/eller 413P-CR.



Mättet tas från vola.



Mättet för handbredden tas i mm. Skenan måste tas ut vid tvätt.



## Art. 812, Pucci Fingerskiljare

Behandlingsortos för fingrar. Ett mjukt fingerband för avskiljning av fingrarna. Lätt att applicera med kardborre. Kan användas ensam i behandlingen eller tillsammans med någon av Pucci-ortoserna. Ger ett lätt stöd åt de proximala phalangerna och håller fingrarna i en lätt sträckning. Bandet är konstruerat av ett mjukt skummateriale vilket minskar risken för tryck vid ömtålig hud. Finns även i barnstorlek. Universalmodell.

812	Pucci Fingerskiljare		
812-Vuxen	Vänster/Höger	Universal	Universal storlek
812P-Barn	Vänster/Höger	Universal	Universal storlek

Bandets längd:  
Barn: 40 centimeter  
Vuxna: 52 centimeter





### Art. 411, Pucci EZE

Handledsortos med utbyttbar stor och liten handrulle. Denna ortos är utvecklad för att tillåta fortskridande behandling av kontrakturer i fingrar, hand och handled. Handledpositionen kan optimeras genom den formbara skumplastramen i aluminium. Genom en stor eller liten handrulle sker fortskridande extension av fingrar och hand. Ortosen är lätt att justera utan värme eller verktyg. Klädsel till ortosen och handrullen är tillverkad av ett mjukt och ventilerande material.

Ortosen finns även barnstorlek. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- och vänstermodell.

**INDIKATIONER:** Spinal ryggmärgsskada, skullskada och geriatriska patienter.

411	Pucci EZE, Vä/Hö		
411L-Vuxen	Vänster	Ramlängd upp till 180 mm	Universal storlek
411R-Vuxen	Höger	Ramlängd upp till 180 mm	Universal storlek
411PL-Barn	Vänster	Ramlängd upp till 170 mm	Universal storlek
411PR-Barn	Höger	Ramlängd upp till 170 mm	Universal storlek

VUXEN: Formbar skumplastram (180 mm) i aluminium för handled, hand & fingrar. Vid beställning av extraklädsel uppge 411-CL och/eller 411-CR.

BARN: Formbar skumplastram (170 mm) i aluminium för handled, hand & finger. Vid beställning av extraklädsel uppge 411 P-CL och/eller 411 P-CR.



### Art. 415, Pucci Reflex

Reflexinhiberande kombinationsortos. Denna ortos har utvecklats som en kombinationsortos. Den ger möjlighet för en lätt passiv töjning åt handen/fingrar med flexionskontrakturer genom den justerbara fingerplattan. Denna kan enkelt bytas ut mot en stor eller liten handrulle för fortskridande extension av finger/hand. Skumplastramen kan enkelt justeras för optimal handleds- och tumposition. Ortosen finns också i barnstorlek. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- och vänstermodell. **INDIKATIONER:** Minska spasticitet. Förhindra förkortning av flexorer – bibehålla passiv rörlighet. Töja på kontrakturer – öka passiv rörlighet.

415	Pucci Reflex, Vä/Hö		
415L-Vuxen	Vänster	Handbredd upp till 115 mm	Universal
415R-Vuxen	Höger	Handbredd upp till 115 mm	Universal
415PL-Barn	Vänster	Handbredd upp till 105 mm	Universal
415PR-Barn	Höger	Handbredd upp till 105 mm	Universal

Kombinationsortos med formbar skumplastram (vuxen 180 mm och barn 170 mm) i aluminium för underarm och justerbar fingerplatta för hand och fingrar. Fingerplattans bredd för vuxen: 115 mm och för barn 105 mm.

Vid beställning av extraklädsel till vuxen uppge 415-CL och/eller 415 CR.

Vid beställning av extraklädsel till barn uppge 415P-CL och/eller 415P-CR.



Mättet för handbredden tas i mm. Skenan måste tas ut vid tvätt.

### Art. 325, Air Soft-viloortos

Ortosen ger stöd för fingrar, tumme och handled i en funktionell och/ eller viloställning. Aluminiumramen ger möjlighet att justera allt efter patientens framsteg vid trauma/kontrakturer. Inga verktyg eller värme behövs. Viloortosen är fodrad med ett ventilerande material. Kan tvättas i maskin i tvättpåse på låg värme. **INDIKATIONER:** Postoperativt/ skada, dropphand, stramhet i fingerflexorerna och vid hudömtålighet. Rekommenderas ej vid stark spasticitet.

<b>325</b>	<b>Finger/hand viloortos, Vä/Hö</b>		
Storlek	B-Small	C-Medium	D-Large
Bredd	57-70	73-83	86-95
Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Tillverkas i vänster- och högerutförande.			



[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)  
Facebook: sök efter Mediroyal



125

### Art. 125, Basic Viloortos

Lättviktsortos med ställbar ram, klädd i Plastazote. Ger stöd åt fingrar, tumme och handled i en funktionell och/eller viloställning. Tillåter upp till 60° MCP-flexion och handled flexion/extension. Korsande band säkrar handleden. Denna ortos kan tvättas för hand i mild tvållösning och har löstagbara band. **INDIKATIONER:** Postoperativt/ skada och vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident). Rekommenderas ej vid stark spasticitet.

125	Basic Viloortos, Hö/vä			
Storlek	B-Small	C-Medium	D-Large	
Bredd	57-70	73-83	86-95	
Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Alla ortoser görs i höger- eller vänsterutförande.				

CE



www.mediroyal.se  
Facebook: sök efter Mediroyal



### Art. TH 1000, Anti-spasticitetsskena

Bibehåller volara valvet och håller handen i reflex-inhiberande ställning. Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft.

**INDIKATIONER:** Spasticitet eller för att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident) Höger- och vänster modell.



#### TH 1000 Anti-spasticitetsskena, Hö/vä

Storlek	Small	Medium	Large
Bredd	57-70	73-83	86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Storlekar  
Small: 02 Medium: 03 Large: 04

Ange vänster eller höger.



### Art. TH 1001, Spasticitetsskena

Hjälper till att hålla handleden i neutral position och bibehåller tummens öppningsgrepp. Konen inhiberar långfingerspasticitet. Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft. **INDIKATIONER:** Spasticitet eller för att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident) Höger- och vänstermodell.



#### TH 1001 Spasticitetsskena, Vä/Hö

Storlek	Small	Medium	Large
Bredd	57-70	73-83	86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Storlek:  
Small: 02 Medium: 03 Large: 04

Ange vänster eller höger.





### Art. 1002, Skena i funktionsställning

Håller hand och handled i funktionell/vilo position. Handled 30° extension, MCP 50° flexion, IP-leder 10-30° flexion. Tillverkad i 3,2 mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft. **INDIKATIONER:** Spasticitet eller för att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident) Höger- och vänstermodell.

TH 1002		Skena i funktionsställning, Hö/vä		
Storlek	Small	Medium	Large	
Bredd	57-70	73-83	86-95	

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Storlekar:  
Small: 02 Medium: 03 Large: 04

Ange vänster eller höger.

CE



### Art. TH 1003, Neutral positionsskena

Hjälper till att hålla hand och handled i neutral, vilande, ställning. Tillverkad i 3,2 mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft. **INDIKATIONER:** Spasticitet eller för att förhindra CVA (Cerebral Vaskulär Accident).

TH 1003		Skena i funktionsställning, Hö/vä		
Storlek	Small	Medium	Large	
Bredd	57-70	73-83	86-95	

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Storlek  
Small: 02 Medium: 03 Large: 04

Ange vänster eller höger.

CE





### Art. 902, Ödemhandske öppna fingertoppar

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Öppna fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras.  
**INDIKATIONER:** Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

#### 902 Ödemhandske öppna fingertoppar, Hö/vä

Storlek	XS	S	M	L
Omkrets	178	203	228	255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar. Modellen finns i höger och vänster och i fyra storlekar. Säljs styckvis.



### Art. 903, Ödemhandske slutna fingertoppar

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Slutna fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras.  
**INDIKATIONER:** Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

#### 903 Ödemhandske slutna fingertoppar, Hö/vä

Storlek	XS	S	M	L
Omkrets	178	203	228	255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar. Modellen finns i höger och vänster och i fyra storlekar. Säljs styckvis.






### Art. 904, Ödemhandske, kort handled

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Handledslängd och med öppet sprund. Slutna fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger – och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras. **INDIKATIONER:** Förebyggande vid ödem vid tex akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

904 Ödemhandske, kort handled, Vä/Hö				
Storlek	S	M	L	
Omkrets	203	228	255	

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måtten hamnar mellan två storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och i fyra storlekar.

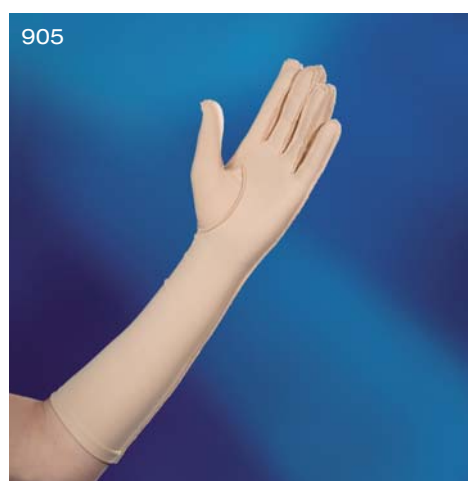

### Art. 905, Ödemhandske slutna fingertoppar, lång

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Slutna fingertoppar och lång modell (350 mm). Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras. **INDIKATIONER:** Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

905 Ödemhandske slutna fingertoppar, lång, Vä/Hö		
Storlek	L	
Omkrets	255	


Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måtten hamnar mellan två storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och säljs styckvis. Finns enbart i large.



## Art. 907, Isotoner-handske ¾-finger

Latexfria handskar med lätt kompression för lätt smärta och svullnad av handen. Mjuk, sömlös konstruktion som eliminerar tryckpunkter. Sömmarna är vända på utsidan av handsken, bort från huden.

Isotonerhandsken är den enda tillgängliga handsken utan sömmar vid basen av tummen - ett känsligt område för smärta. Tillverkade av nylon och Lycra och tvåvägsriktning på materialet. Behagliga för heldagsanvändning. Öppen fingertoppsdesign för en aktiv hand. Lätt att ta av och på. Neutral färg. Säljs i par. **INDIKATIONER:** Svullnad/smärta orsakad av skada, artrit eller andra kroniska orsaker, långtidsanvändning i arbete.

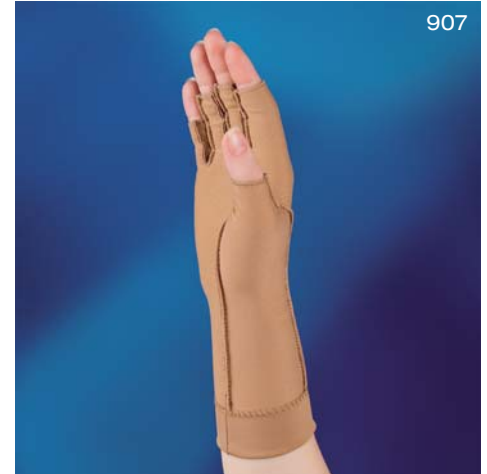

### 907 Isotoner-handske ¾-finger, Par

Storlek	S	M	L		
Omkrets	203	228	255		

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måtten hamnar mellan två storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och säljs i par. Maskintvättbara.





Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden  
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)  
[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)

**Living Proof**  
mediroyal.se